



Be free to move
Unabhängigkeit im Alltag



TGR®

from 1978
seit 1978



Reg. n. 6130
UNI EN ISO 9001:2008



Suprema





Suprema

SUPER • SLIDE • RELAX

🇬🇧 The chair **SUPREMA**, in all its version, has been designed to give a higher **freedom of movement** to those people who have to use a chair to move comfortably in indoor spaces.

The Suprema has been **equipped with a double battery** to offer a **wider autonomy** when operating in indoor spaces; thus meaning both home and at work.

The innovation of this solution is given by the fact that, once exhausted the charge of the first battery, the user must simply wait until the electronic board provides automatically to switch on second battery. After use, you can simply charge the exhausted battery, only.

The Suprema allows you to move freely in narrow spaces and access cramped rooms as well as bathrooms, it is practical and silent and its base is provided with pivoting wheels and driving steering wheels.

On request, the sales network is available for not binding demonstration at home.



🇩🇪 Der Rollstuhl **SUPREMA** ermöglicht in allen Versionen ein bequemes und komfortables Leben im Innenbereich, indem er die Bewegungsfreiheit und das Handlungsfeld des Nutzers erweitert.

Wegen seiner **Ausstattung mit zwei Batterien** stellt der Rollstuhl **Suprema größtmögliche Autonomie** im häuslichen und beruflichen Umfeld sicher.

Ein innovatives System regelt ganz von selbst den Wechsel auf die zweite Batterie, wenn die Ladung der ersten Batterie erschöpft ist. Der Benutzer muss lediglich einen Moment abwarten, bis die elektronische Steuerung den Umschaltprozess vorgenommen hat. Ist der Wechsel abgeschlossen, kann die entladene Batterie aufgeladen werden.

Der praktische Rollstuhl ist äußerst geräuscharm und hat ein schlichtes und funktionales Design. Er ist mit lenkbaren Antriebsrädern und schwenkbaren Rollen versehen, wodurch leichter Zugang zu engen Räumen wie auch zu Gemeinschaftseinrichtungen ermöglicht wird.

Auf Anfrage wird das Gerät unverbindlich am gewünschten Einsatzort vorgeführt und erprobt.

mod. **SUPER**

Code/Artikel-Nr.: E7100000

🇬🇧 It has been designed to allow seat's **vertical motion** from a minimum height of **43 cm** to a maximum height of **74 cm** from the ground.

🇩🇪 Dieses Modell hat eine stufenlos **verstellbare Sitzhöhe** von minimal **43 cm** bis maximal **74 cm**.



**IN ALL VERSIONS
BEI ALLEN MODELLEN**



mod. **SLIDE**

Code/Artikel-Nr.: E8100000

🇬🇧 It has been designed to allow **seat's vertical motion** from a minimum height of **43 cm** to a maximum height of **74 cm** from the ground, it **also** allows a **seat excursion** of maximum **20 cm**. onwards.

🇩🇪 Die **Sitzhöhe** dieses Modells ist **stufenlos verstellbar** von minimal **43 cm** bis maximal **74 cm**. Zusätzlich kann die **Sitzfläche** um maximal **20 cm** nach vorne **herausgefahren** werden.





mod. **RELAX**

Code/Artikel-Nr.: E6100000



It has been designed to allow **seat's vertical motion** from a minimum height of **43 cm** to a maximum height of **65 cm** from the ground, it **also** features the **tilting movement of the seat** up to **12°**.
Maximum tilted height **84 cm**.



Dieses Modell hat eine **stufenlos verstellbare Sitzhöhe** von minimal **43 cm** bis maximal **65 cm**. Außerdem kann der Sitz um bis zu **12° nach hinten geneigt** werden. In geneigter Stellung beträgt die höchstmögliche Position der vorderen Sitzkante **84 cm**.

ACCESSORIES • ZUBEHÖR

cod. NE001



5 cm. Padded Lateral Sides
Removable and very helpful to reduce seat dimension.

Abnehmbare Seitenteile mit 5 cm Polsterung.
Wenn zusätzlicher Seitenhalt benötigt wird.

cod. NE003 (right/rechts)
cod. NE004 (left/links)
cod. NE005
(Couple for model Slide, only Paar, nur für Mod. Slide)



Lateral leg support
It helps the sitting person to keep legs within chairs outline.

Seitliche Beinstützen
Halten die Beine innerhalb des Sitzbereichs.

cod. NE006



Folding footrest.
Compared to the standard one it is longer and allows you to stretch legs out. When closed, it does not interfere with the floor surface.

Faltbare Fußstütze
Sie ist länger als die Standard-Fußstütze und erlaubt ein bequemes Ausstrecken der Beine. Wenn sie eingeklappt ist, hat sie keinen Bodenkontakt, daher wird die Bewegung nicht beeinträchtigt.

cod. NE007



Footrest
Plastic footrest.

Kunststoff-Fußstütze
Fußstütze mit Aufstellflächen aus Kunststoff.

cod. NE008



Adjustable Leg support
It allows you to keep the leg stretched out and lifted in many different positions.

Hochstellbare Beinstütze
Erlaubt ein Anheben und Ausstrecken des Beins.


TECHNICAL DATA SHEET • TECHNISCHE DATEN

 The SUPREMA chair has been designed to move **ON FLAT SURFACES**, only and **IN INDOOR SPACES**.

Complying with the dimensions shown in the picture, it is also possible to overcome slight obstacles and / or hollows.

 Der Rollstuhl Suprema ist **ausschließlich für die Anwendung auf der Ebene im Innenbereich** vorgesehen.

Dennoch ist es möglich, kleinere Unebenheiten zu überwinden, wenn sich diese im Rahmen der hier angegebenen Maße befinden.

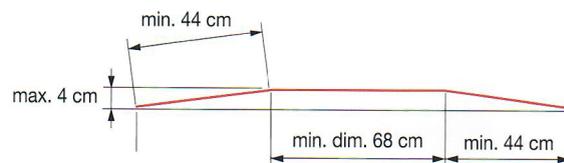

	 Maximum weight max. Transportgewicht	Seat's vertical motion Höhenverstellung des Sitzes	Seat's horizontal movement Ausfahrmöglichkeit der Sitzfläche	Tilting movement of the seat Neigung des Sitzes	Maximum tilted height Höchster Punkt der Sitzkante bei Neigung	Speed Geschwindigkeit KM/h
SUPREMA Super	53	120	Min. 43 - Max. 74 cm	-	-	max. 1,23
SUPREMA Slide	58	120	Min. 43 - Max. 74 cm	Min. 0 - Max. 20 cm	-	max. 1,23
SUPREMA Relax	60	120	Min. 43 - Max. 65 cm	-	84 cm	max. 1,23

Follow carefully and strictly the prescriptions, instructions and warnings given on the use and maintenance manual.
Die Anweisungen der Bedienungsanleitung sind genauestens zu beachten und zu befolgen.

TECHNICAL FEATURES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN




- Double dry battery (no maintenance is required) 12V - 18Ah
- Battery charge status indicator
- All kinds of motion are controlled by 12V c.c. electric motors
- **Built-in electronic battery charger**
- **Automatic system to select the empty battery to be recharged**
- Led indicating that the battery is completely charged
- Electronic board to control motion
- Operation is controlled through a user-friendly Joystick which allows the user to govern 1st and 2nd speed
- Seat motion button of the delayed type as to avoid unintended operation
- Seat Vertical motion starting and arresting gradually
- Operational autonomy of **each battery: 2H 30'** hours for **continuous motion**
- Automatic disabling of the electric motor, in case it is not used for more than **4 minutes**
- Emergency / Switch off button
- System security that disables run motion when reaching maximum lifting position (only for models Super and Slide)
- Lifting armrests
- Adjustable footrest
- Padded seat Anatomically-designed and variable-density with fire retardant, stain resistant coating

- **Not binding demonstration and free training course at customer's home**
- **After-sale technical service provided by T.G.R. authorised service centres**
- **24 month warranty**



- ZWEI wiederaufladbare, wartungsfreie 12V 18AH Bleiakkus
- Batterieladestandsanzeige
- Alle Bewegungen erfolgen über 12 V c.c. Elektromotoren
- **Eingebautes elektronisches Batterieladegerät**
- **Automatische Steuerung der Batteriewahl**
- LED zur Anzeige des Batterieladestands während des Ladevorgangs
- Joystick zur Laufsteuerung und zur Regelung der Geschwindigkeit
- Taster zur Wahl zweier Fahrgeschwindigkeiten, die mittels des Joysticks reguliert werden können
- Funktionstasten zur Sitzbewegung mit automatischer Einschaltverzögerung
- Höhenverstellung mit sanfter Anlauf- und Stoppfunktion
- Durchschnittliche Laufleistung jeder Batterie **2,5 Stunden im Dauerfahrbetrieb**
- Automatische Abschaltung nach 4 Minuten ohne Betätigung
- Not-Aus-Taste
- Sicherheitseinrichtung, die den Fahrbetrieb unterbindet, wenn die Sitzposition für sicheres Fahren zu hoch ist (nur bei den Modellen SUPER und SLIDE)
- Hochklappbare Armlehnen bei allen Modellen
- Einstellbare Fußstütze
- Sitz mit anatomischer Polsterung in abgestufter Festigkeit mit schwer entflammbarem Überzug

- **Unverbindliche Vorführung und Kostenlose Bedienungseinweisung am Einsatzort**
- **Technischer Kundendienst durch autorisierten TGR-Service**
- **24 Monate Garantie**

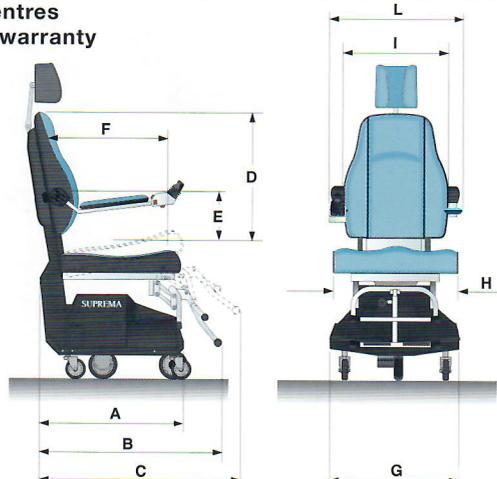

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
SUPREMA Super	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58
SUPREMA Slide	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58
SUPREMA Relax	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58