

NEU

AQUABUDDY

Einfach & schonend

Duschen im Bett

Hilfs-
mittelnummer
51.45.01.1006

Duschen



- einfache & gründliche Körperpflege
- alleine leicht anwendbar
- praktisch & wartungsfrei

Haare waschen



Wasser absaugen



Pflege Zuhause 

Mobile Pflege 

Stationäre Pflege 





AquaBuddy Home

– das mobile Körper-Reinigungssystem mit fließendem Wasser.



Duschen mit regulierbarem Duschkopf (8 L Frischwassertank)



Gründliche Körperreinigung dank fließendem Wasser



Automatisches Absaugen in den Schmutzwassertank



Automatisches Aufblasen des Bassins



Automatisches Ablassen des Bassins

AquaBuddy Home ermöglicht eine einfache und schonende Körperpflege! Einfach duschen und Haare waschen direkt im Bett – ohne, dass dieses nass wird.

AquaBuddy Home lässt sich auch alleine einfach bedienen und in jedem Bett verwenden. Es stehen 8 Liter Frischwasser zur Verfügung, die abgesaugt und in einem Schmutzwassertank gesammelt werden.

AquaBuddy Home bringt Wohlbefinden und verbessert die Lebensqualität von bettlägerigen Menschen und den Pflegenden gleichermaßen.



Die innovative Lösung

AquaBuddy Home ist eine **mobile Dusche**. Dank der speziellen Vakuum-Technologie kann die gründliche Körperreinigung direkt im Bett erfolgen. Der 8-Liter Wassertank ermöglicht die bettlägerige Person bis zu 8 Minuten im Bett zu duschen. Dazu wird ein wasserundurchlässiges Tuch unter der Person ausgebreitet und am Bett oder im mitgelieferten Rahmen fixiert, sodass kein Wasser austreten kann. Das schmutzige Wasser wird gleich wieder abgesaugt und in einem Abwassertank gesammelt.



Die einfache Bedienung

Die **problemlose und schnelle Handhabung** erleichtert den regelmäßigen, täglichen Reinigungsvorgang. Das weiche und flexibel einsetzbare Wannentuch wird mit wenigen Handgriffen um die Person herum installiert. Der gründliche Reinigungsvorgang und das gleichzeitige Absaugen des Schmutzwassers erfolgt zügig und problemlos. Befüllung, Entleerung und Reinigung des mobilen Systems sind in kürzester Zeit erledigt.



Die hilfreichen Vorteile

AquaBuddy Home **reduziert den Zeitaufwand** beträchtlich und bedeutet eine extreme Arbeitserleichterung für die Pflegemitarbeiter und die pflegenden Angehörigen. Der mühsame Transfer ins Bad entfällt. Unnötige Schmerzen und Probleme beim Transport, sowie Sturzgefahr, werden vermieden. Das System erfüllt höchste Hygieneanforderungen, die Verbreitung von Infektionen wird eingedämmt, der Gebrauch von antibakteriellen Mitteln weitestgehend vermieden. Mit dem aufblasbaren Ergo-Bassin ist die gezielte und gründliche Reinigung von einzelnen Körperbereichen, z. B. Haarwäsche und Reinigung im Intimbereich möglich.

Einfache Anwendung



AquaBuddy Home – für die einfache, schonende und gründliche Körperreinigung von bettlägerigen Personen.



1 Mit wenigen Handgriffen wird das wasserdichte Tuch unter der Person ausgebreitet und im Rahmen fixiert.



2 Direkt im Bett und um die Person herum entsteht eine mobile Duschwanne.



3 AquaBuddy Home ermöglicht einen bis zu 8 Minuten langen, gründlichen Duschvorgang.



4 Parallel zum Duschvorgang wird das Schmutzwasser mit dem Absauger wieder entfernt.



5 Zusätzlich können aufblasbare Bassins für die Haarwäsche



6 oder die gezielte Reinigung des Intimbereichs oder von Wunden verwendet werden.

Vorteile für den Patienten

Schonendes und angenehmes Duscherlebnis!

Patienten müssen für den Weg ins Badezimmer nicht in einen Rollstuhl oder andere Transport-Hilfsmittel umgelagert werden. Das erspart den Betroffenen unnötige Schmerzen und schont den Kreislauf!

Wenn ein Pflegefall eintritt, ist AquaBuddy Home oft eine sinnvolle Alternative zum Umbau des Bades! Mit AquaBuddy sparen Sie Zeit, Geld und Baulärm. AquaBuddy ist sofort einsatzbereit.

Der sanfte und gleichmäßige Wasserstrahl wirkt stimulierend auf den Kreislauf des Patienten. Im Sommer bei Höchsttemperaturen wird AquaBuddy Home auch als Möglichkeit zur Abkühlung genutzt. Für Betroffene, die mit AquaBuddy in den Genuss einer vollwertigen Dusche kommen, erhöht sich die Lebensqualität beträchtlich.

Stressfreies und entspanntes Duschen im Bett – dank AquaBuddy Home!

Vorteile für Pflegekräfte/ pflegende Angehörige


Reduzierter Zeitaufwand und extreme Arbeitserleichterung!

Mit AquaBuddy Home wird eine schnelle und gründliche Reinigung mit deutlich reduziertem Zeitaufwand möglich. Der Patiententransfer und verbundene Risiken entfallen vollständig. Es schont den Betroffenen und die Gesundheit der Pflegenden gleichermaßen!

Der leichte Aufbau und die einfache Handhabung von AquaBuddy Home überzeugen Fachkräfte und pflegende Angehörige gleichermaßen. Die Benutzung ist auch für Angehörige problemlos möglich.

AquaBuddy Home lässt sich leicht von nur einer Person bedienen. So können auch im stationären Bereich die Versorgung verbessert und wertvolle Ressourcen eingespart werden.

AquaBuddy Home vermindert die Gefahr einer Infektion! Das Schmutzwasser kann vollständig und umgehend abgesaugt und im 8 L Schmutzwassertank gesammelt werden.

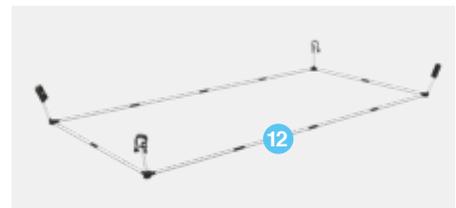

- 1 Schmutzwasser-Ansaugschlauch
- 2 Schmutzwassertank mit Sicherheitsventil gegen Überlaufen
- 3 Integriertes Aufblas- und Absaugsystem für das anschließbare Bassin



Automatisches Aufblasen des Bassins



Automatisches Ablassen des Bassins
- 4 Frischwassertank
- 5 Hohe Mobilität durch 4 unabhängig voneinander bewegliche Lenkrollen
- 6 Aufklappbarer Deckel (wird in geöffnetem Zustand zur Ablage)
- 7 Regulierbarer Duschkopf
- 8 Raum zur Aufbewahrung des Rahmens für die „Duschwanne“
- 9 „Clean Suction“ System für Wasserversorgung und Absaugung, bestehend aus zwei getrennten und verschmutzungsfreien Kreisläufen
- 10 Zusätzliches Bassin (aufblasbar) zur gezielten Reinigung einzelner Körperbereiche
- 11 Verbindungsschläuche zum Aufblasen und Absaugen des Bassins
- 12 Duschwannen-Rahmen zum Einhängen des wasserundurchlässigen Tuchs

Technische Daten

Höhe	76 cm
Breite	45 cm
Tiefe	37 cm
Gewicht	13 kg
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Leistung	120 W

Wasserversorgung:

Frischwassertank	8 L
Schmutzwassertank	8 L

**Hilfs-
mittelnummer
51.45.01.1006**