

Be free to move  
Unabhängigkeit im Alltag

Authentic



CE



**TGR**

since  
seit 1978



Reg. N. 6130-A  
UNI EN ISO 9001:2015



**SUPER  
SLIDE  
RELAX**

**Suprema**



🇬🇧 The chair **SUPREMA**, in all its version, has been designed to give a higher **freedom of movement** to those people who have to use a chair to move indoors comfortably.

The Suprema has been **equipped with a double battery** to offer a **wider autonomy** when operating in indoor spaces; thus meaning both home and at work.

The Suprema allows you to move freely in **narrow spaces** and access cramped rooms as well as bathrooms, it is **practical and silent** and its base is provided with pivoting wheels and driving steering wheels.

On request, the sales network is available for demonstration at home.






🇩🇪 Der Rollstuhl **SUPREMA** ermöglicht in allen Versionen ein bequemes und komfortables Leben im Innenbereich, indem er die Bewegungsfreiheit und das Handlungsfeld des Nutzers erweitert.

Wegen seiner **Ausstattung mit zwei Batterien** stellt der Rollstuhl **Suprema größtmögliche Autonomie** im häuslichen und beruflichen Umfeld sicher.

Der **praktische** Rollstuhl ist äußerst **geräuscharm** und hat ein schlichtes und funktionales Design. Er ist mit lenkbaren Antriebsrädern und schwenkbaren Rollen versehen, wodurch leichter Zugang zu **engen Räumen** wie auch zu Gemeinschaftseinrichtungen ermöglicht wird.

Auf Anfrage wird das Gerät am gewünschten Einsatzort vorgeführt und erprobt.

## ACCESSORIES • ZUBEHÖR


cod. NE001	cod. NE003 (right) - cod. NE004 (left) cod. NE005 (Only mod. Slide)	cod. NE006	cod. NE007	cod. NE008
				
<p>🇬🇧 5 cm. Padded Lateral Sides 🇩🇪 Abnehmbare Seitenteile</p>	<p>🇬🇧 Lateral leg support 🇩🇪 Seitliche Beinstützen</p>	<p>🇬🇧 Folding footrest. 🇩🇪 Faltbare Fußstütze</p>	<p>🇬🇧 Plastic Footrest 🇩🇪 Kunststoff-Fußstütze</p>	<p>🇬🇧 Adjustable Leg support 🇩🇪 Hochstellbare Beinstütze</p>

## mod. **SUPER**

Code/Artikel-Nr.: E7100000

🇬🇧 It has been designed to allow seat's **vertical motion** from a minimum height of **43 cm** to a maximum height of **74 cm** from the ground.

🇩🇪 Dieses Modell hat eine stufenlos **verstellbare Sitzhöhe** von minimal **43 cm** bis maximal **74 cm**.

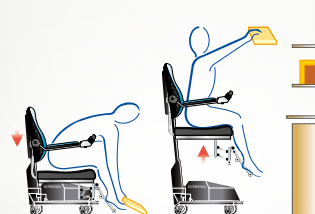


## mod. **RELAX**

Code/Artikel-Nr.: E6100000

🇬🇧 It has been designed to allow **seat's vertical motion** from a minimum height of **43 cm** to a maximum height of **65 cm** from the ground, it **also** features the **tilting movement of the seat** up to **12°**. Maximum tilted height **84 cm**.

🇩🇪 Dieses Modell hat eine **stufenlos verstellbare Sitzhöhe** von minimal **43 cm** bis maximal **65 cm**. Außerdem kann der Sitz um bis zu **12° nach hinten geneigt** werden. In geneigter Stellung beträgt die höchstmögliche Position der vorderen Sitzkante **84 cm**.

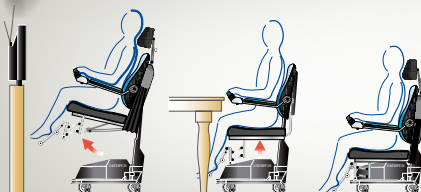


## mod. **SLIDE**

Code/Artikel-Nr.: E8100000

🇬🇧 It has been designed to allow **seat's vertical motion** from a minimum height of **43 cm** to a maximum height of **74 cm** from the ground, it **also** allows a **seat excursion** of maximum **20 cm**. onwards.

🇩🇪 Die **Sitzhöhe** dieses Modells ist **stufenlos verstellbar** von minimal **43 cm** bis maximal **74 cm**. Zusätzlich kann die **Sitzfläche** um maximal **20 cm** nach vorne **herausgefahren** werden.

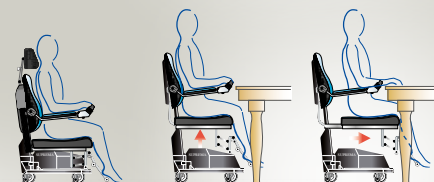


# TECHNICAL DATA SHEET • TECHNISCHE DATEN

The **SUPREMA** chair has been designed to move **ON FLAT SURFACES**, only and **IN INDOOR SPACES**.  
Complying with the dimensions shown in the picture, it is also possible to overcome slight obstacles and / or hollows.

Der Rollstuhl **SUPREMA** ist **ausschließlich für die Anwendung auf der Ebene im Innenbereich** vorgesehen. Dennoch ist es möglich, kleinere Unebenheiten zu überwinden, wenn sich diese im Rahmen der hier angegebenen Maße befinden.

	Kg	Maximum weight max. Transportgewicht	Seat's vertical motion Höhenverstellung des Sitzes	Speed Geschwindigkeit KM/h
<b>SUPREMA Super</b>	53	120	Min. 43 - Max. 74 cm	max. 1,23
<b>SUPREMA Slide</b>	58	120	Min. 43 - Max. 74 cm	max. 1,23
<b>SUPREMA Relax</b>	60	120	Min. 43 - Max. 65 cm	max. 1,23

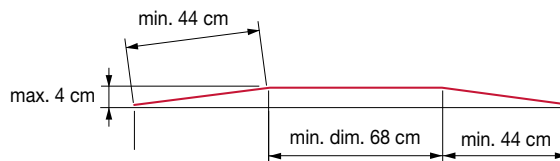

## TECHNICAL FEATURES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Double dry battery** (no maintenance is required) 12V - 18Ah
- Battery charge status indicator
- All kinds of motion are controlled by 12V c.c. electric motors
- Built-in electronic battery charger**
- Automatic system to select the empty battery to be recharged**
- Led indicating that the battery is completely charged
- Electronic board to control motion
- Operation is controlled through a user-friendly Joystick which allows the user to govern 1st and 2nd speed
- Seat motion button of the delayed type as to avoid unintended operation
- Seat Vertical motion starting and arresting gradually
- Operational autonomy of **each battery: 2H 30'** hours for **continuous motion**
- Automatic disabling** of the electric motor, in case it is not used for more than **4 minutes**
- Emergency / Switch off button
- System security that disables run motion when reaching maximum lifting position (only for models Super and Slide)
- Lifting armrests
- Adjustable footrest
- Padded seat Anatomically-designed and variable-density with fire retardant, stain resistant coating

- **Demostration and free training course at costumer's home**
- **After-sale technical service provided by T.G.R. authorised service centres**
- **24 month warranty**

- ZWEI** wiederaufladbare, wartungsfreie 12V 18AH **Bleiakkus**
- Batterieladestandsanzeige
- Alle Bewegungen erfolgen über 12 V c.c. Elektromotoren
- Eingebautes elektronisches Batterieladegerät**
- Automatische Steuerung der Batteriewahl**
- LED zur Anzeige des Batterieladestands während des Ladevorgangs
- Joystick zur Laufsteuerung und zur Regelung der Geschwindigkeit
- Taster zur Wahl zweier Fahrgeschwindigkeiten, die mittels des Joysticks reguliert werden können
- Funktionstasten zur Sitzbewegung mit automatischer Einschaltverzögerung
- Höhenverstellung mit sanfter Anlauf- und Stoppfunktion
- Durchschnittliche Laufleistung jeder Batterie **2,5 Stunden im Dauerfahrbetrieb**
- Automatische Abschaltung nach 4 Minuten ohne Betätigung
- Not-Aus-Taste
- Sicherheitseinrichtung, die den Fahrbetrieb unterbindet, wenn die Sitzposition für sicheres Fahren zu hoch ist (nur bei den Modellen SUPER und SLIDE)
- Hochklappbare Armlehnen bei allen Modellen
- Einstellbare Fußstütze
- Sitz mit anatomischer Polsterung in abgestufter Festigkeit mit schwer entflammablem Überzug

- **Vorführung und Bedienungseinweisung am Einsatzort**
- **Technischer Kundendienst durch autorisierten TGR-Service**
- **24 Monate Garantie**

The data are indicative and not binding. T.G.R. reserves the right to change them at any time.

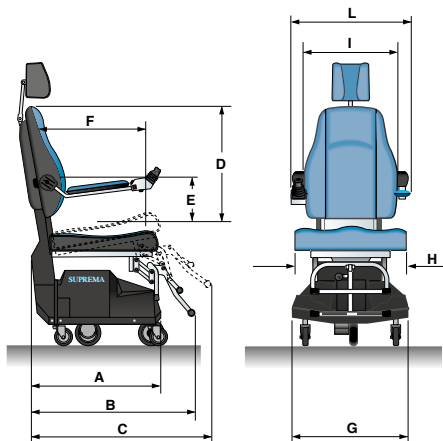

Die genannten Produktdaten sind nicht bindend. T.G.R. behält sich eventuelle Aktualisierungen vor.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
<b>SUPREMA Super</b>	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58
<b>SUPREMA Slide</b>	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58
<b>SUPREMA Relax</b>	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58

Follow carefully and strictly the prescriptions, instructions and warnings given on the use and maintenance manual.  
*Die Anweisungen der Bedienungsanleitung sind genauestens zu beachten und zu befolgen.*

**T.G.R. S.r.l.**

Via Lombardia, 12  
40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Italia  
Tel. (+39) 051 6523511 - Fax (+39) 051 798238  
<http://www.tgr.it> - e-mail [tgr@tgr.it](mailto:tgr@tgr.it)  
Reg. Impr. BO/C.F. e P.IVA 01234540373  
M.BO 014671-R.E.A.241829-CAP.SOC. EURO 100.000 i.v.



**T.G.R. GmbH**

Löffelholzstraße 20, Haus 8 Ost  
90441 Nürnberg - Germany  
Tel. (+49) 0911 94184700 - Fax (+49) 0911 94184701  
<http://www.tgr-deutschland.de>  
e-mail [info@tgr-deutschland.de](mailto:info@tgr-deutschland.de)



**NEW PRODUCT LAUNCH  
SPRING 2020**



Authorized dealer / Autorisierter Fachhändler: